

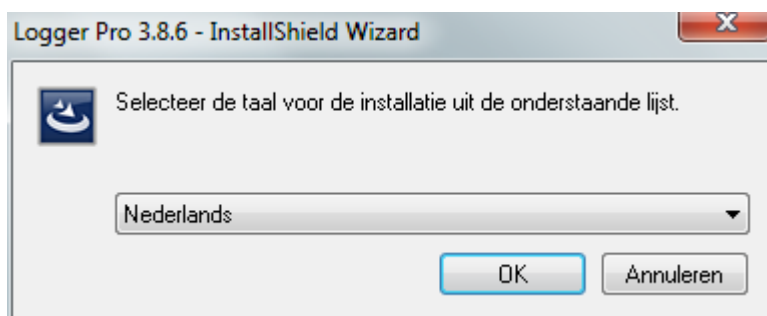



Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

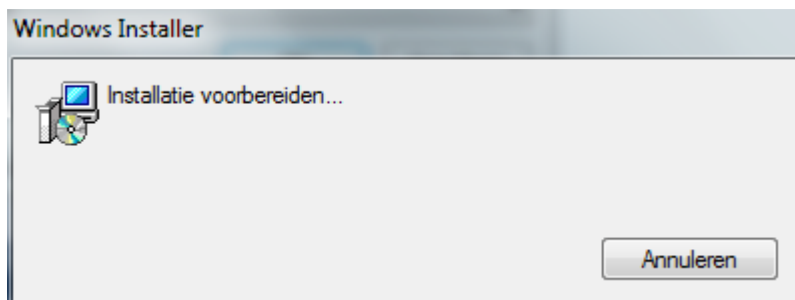


Kies de taal voor installatie

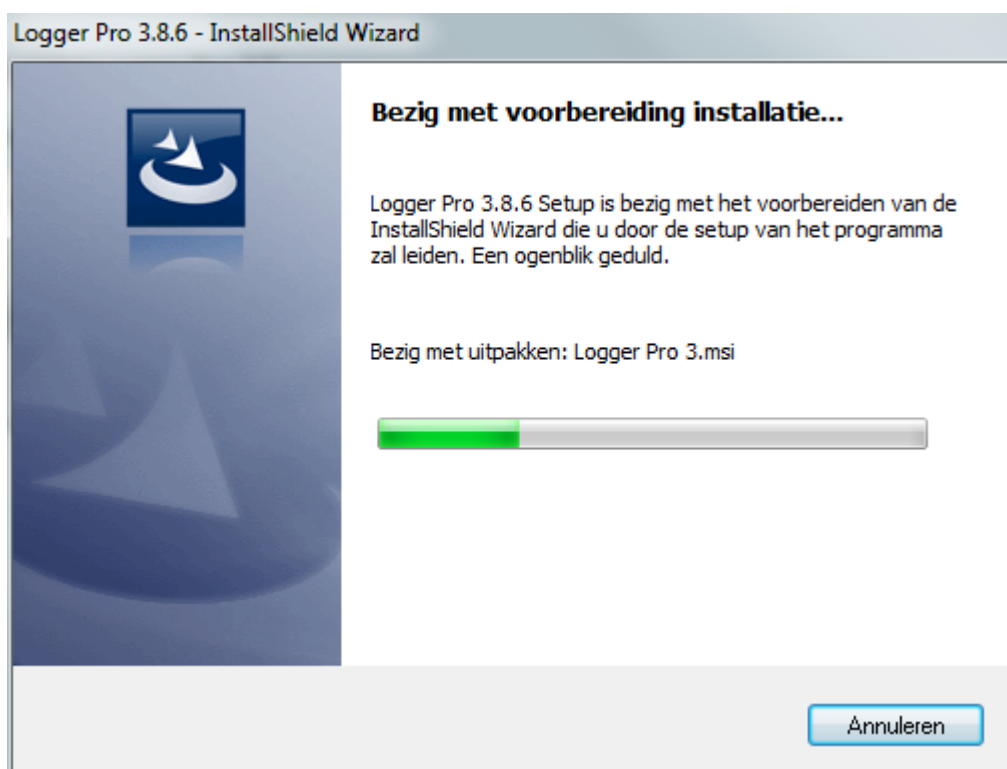


Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

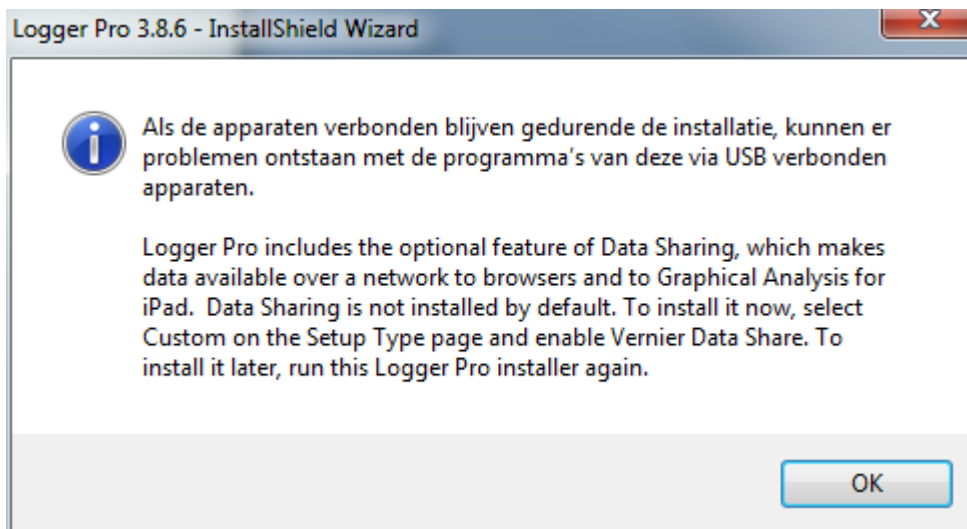


Zorg ervoor dat er geen Vernier interfaces en/of sensoren aan de computer zijn gekoppeld!

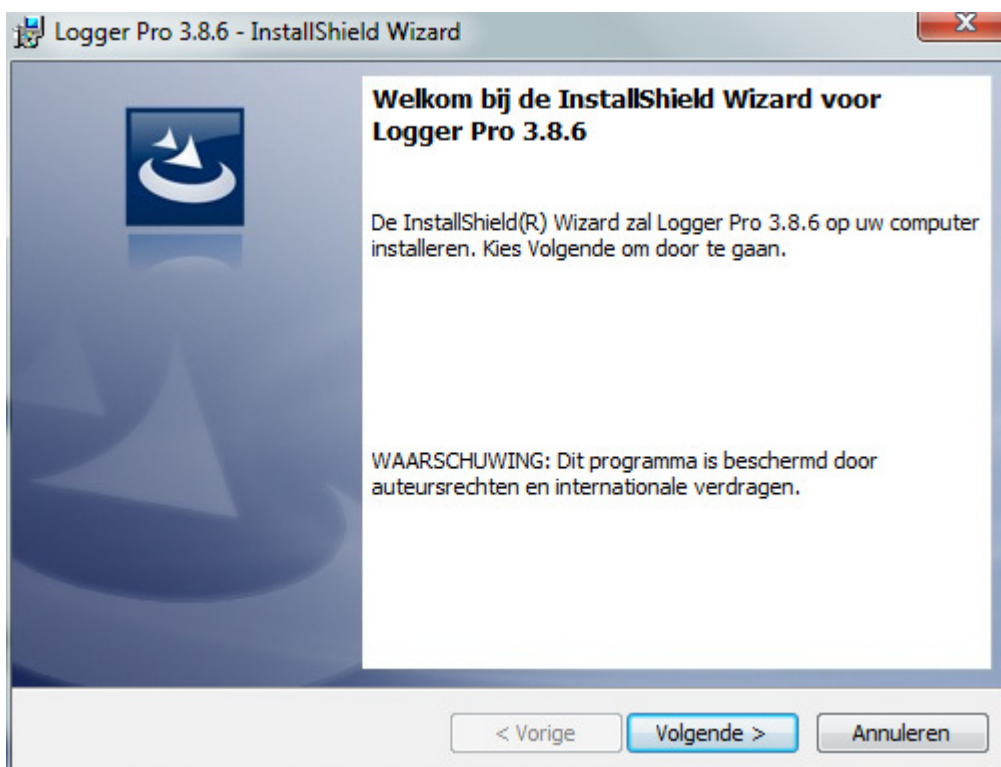


Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

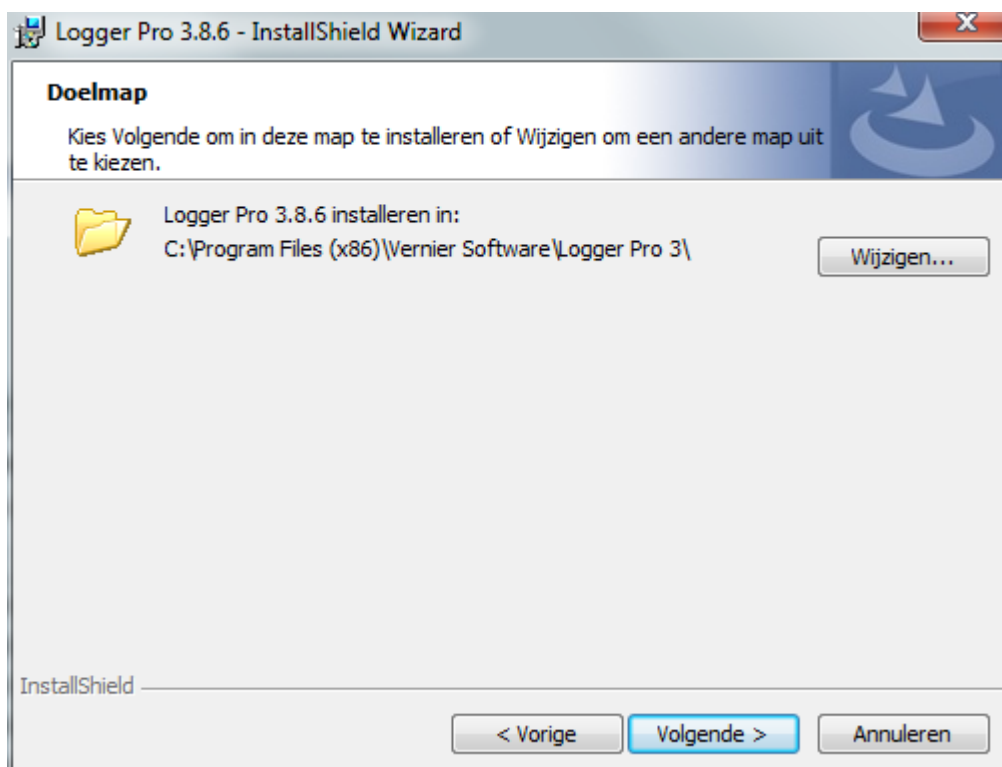

Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

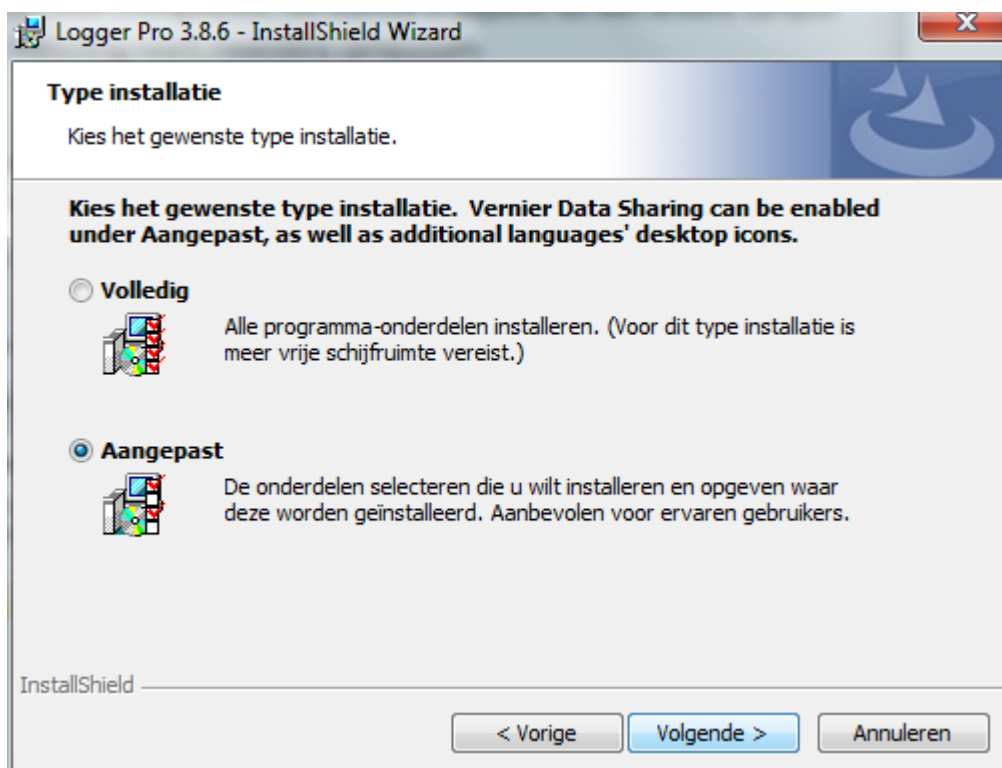


Kies hier voor aangepaste installatie om extra opties te installeren, zoals de mogelijkheid voor Data Share, andere talen en het wel of niet installeren van Bonjour en Quicktime.

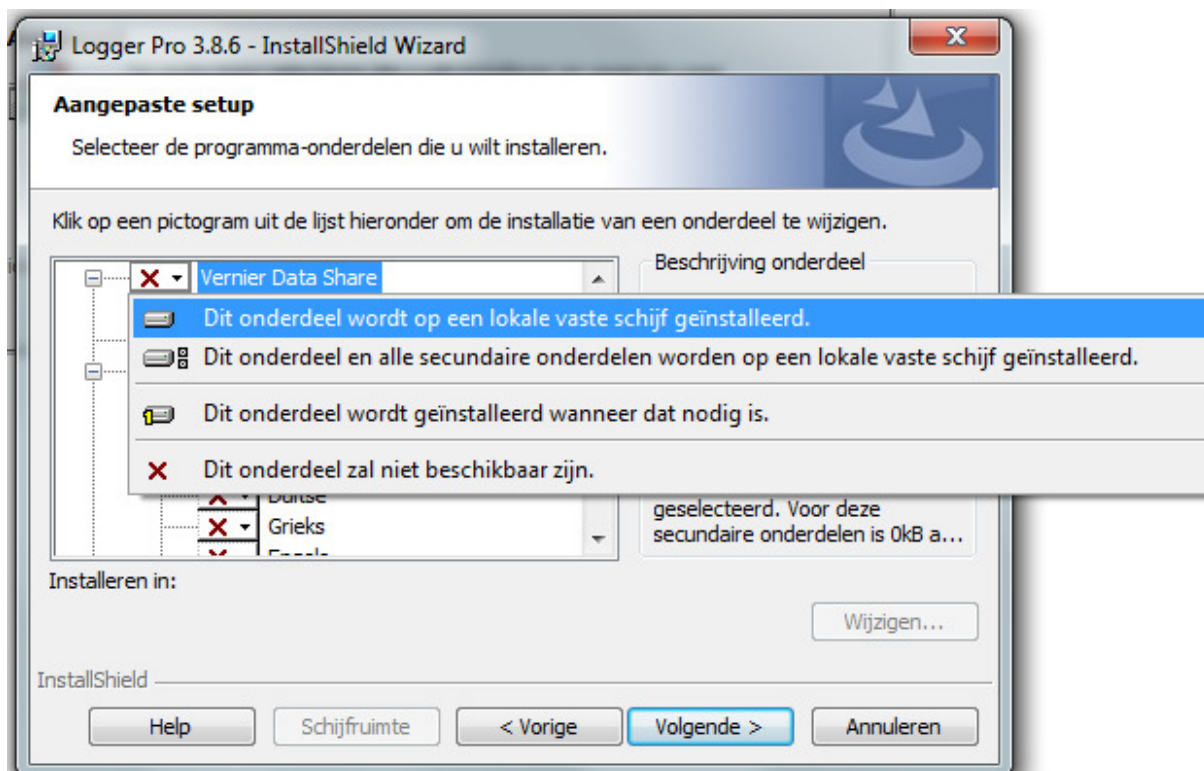


Kies hier voor de optie om Data Share wel of niet te installeren (standaard niet)



Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

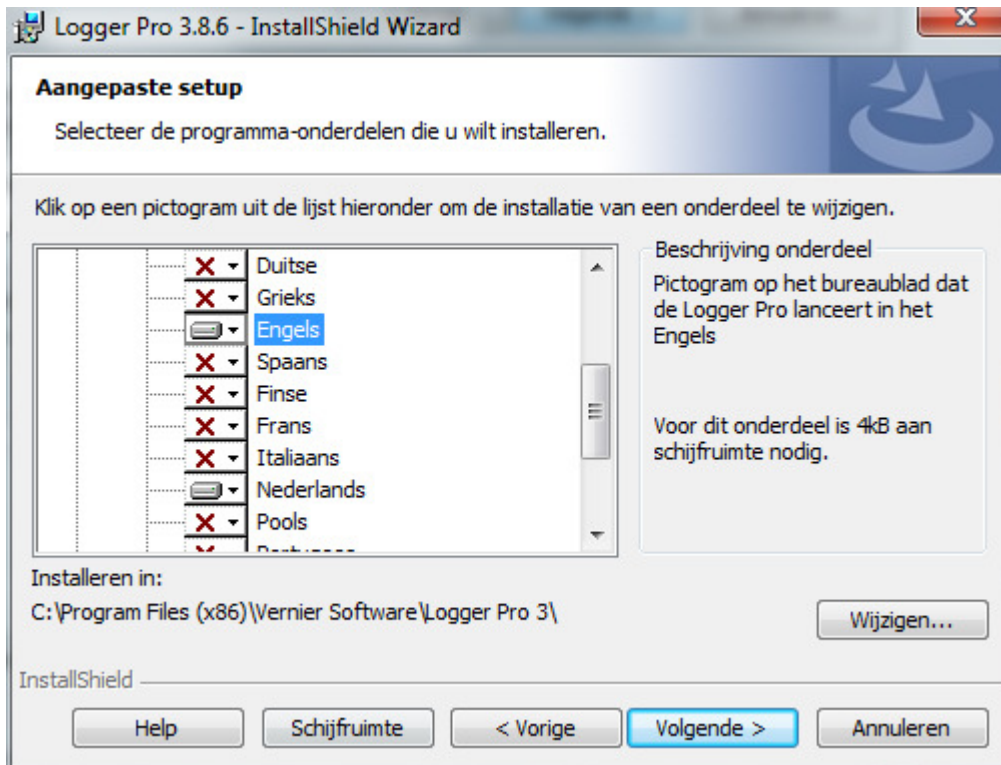

Kies hier voor meerdere talen

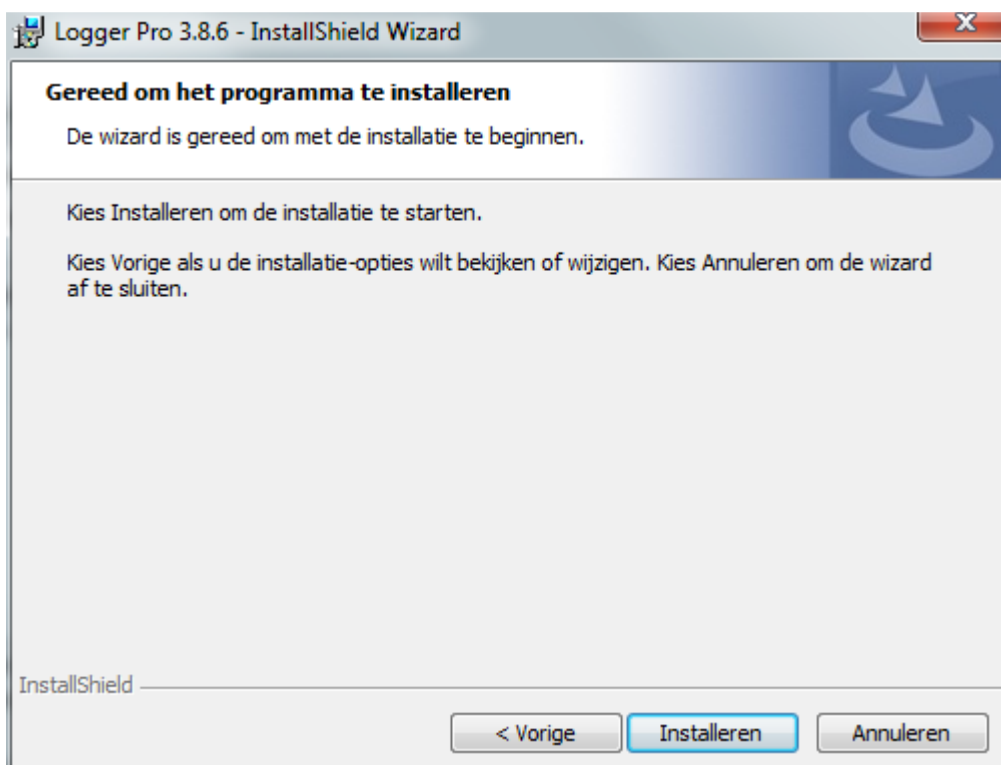


Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

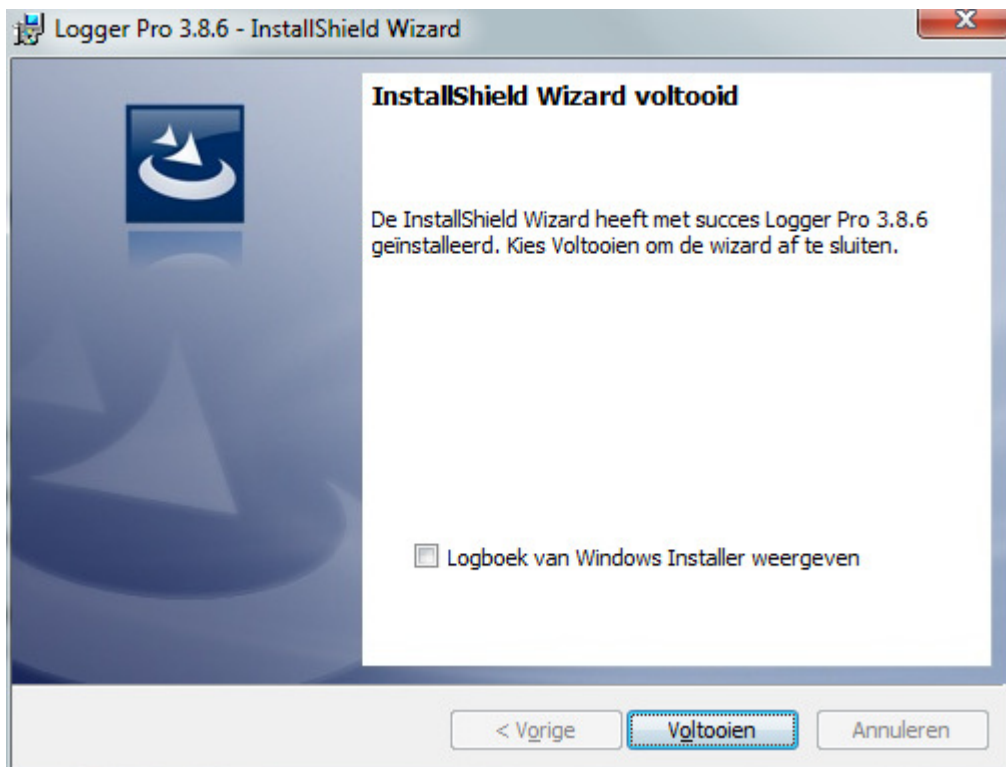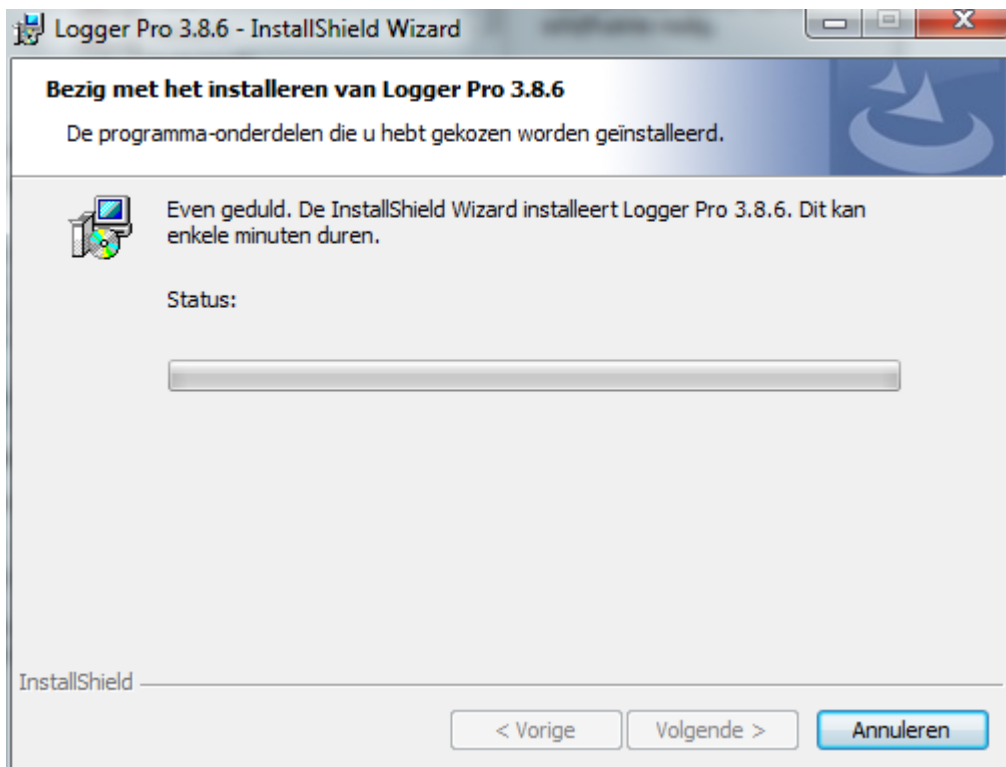


Klik op voltooien

Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

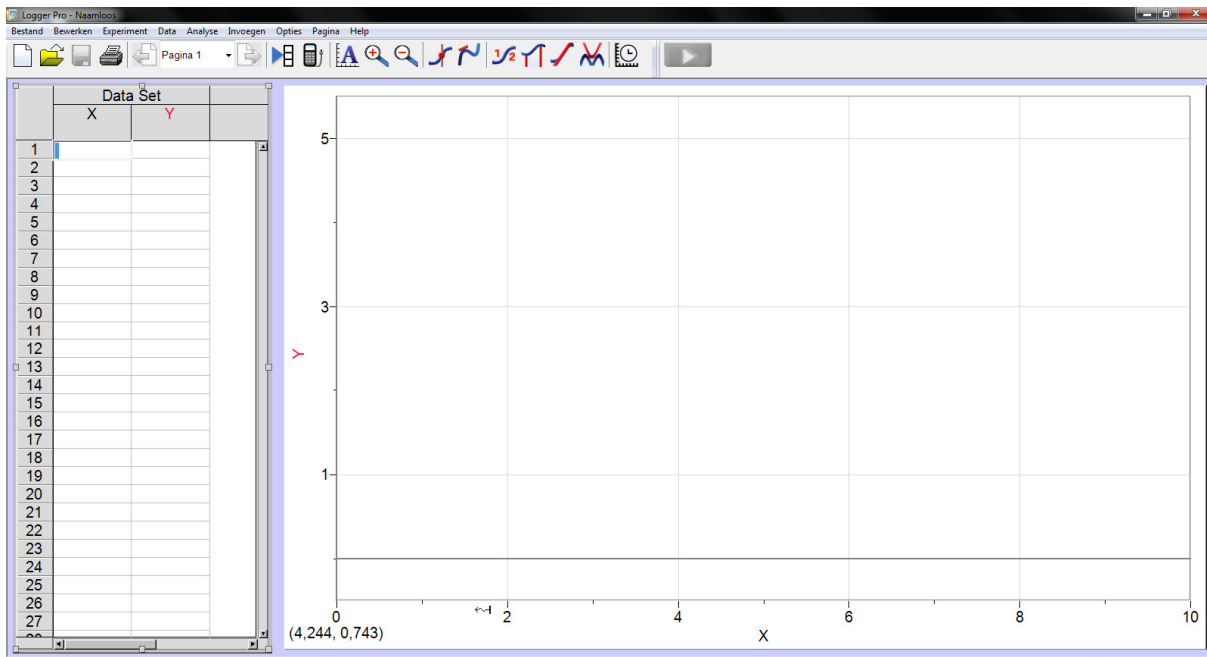

Start Logger Pro

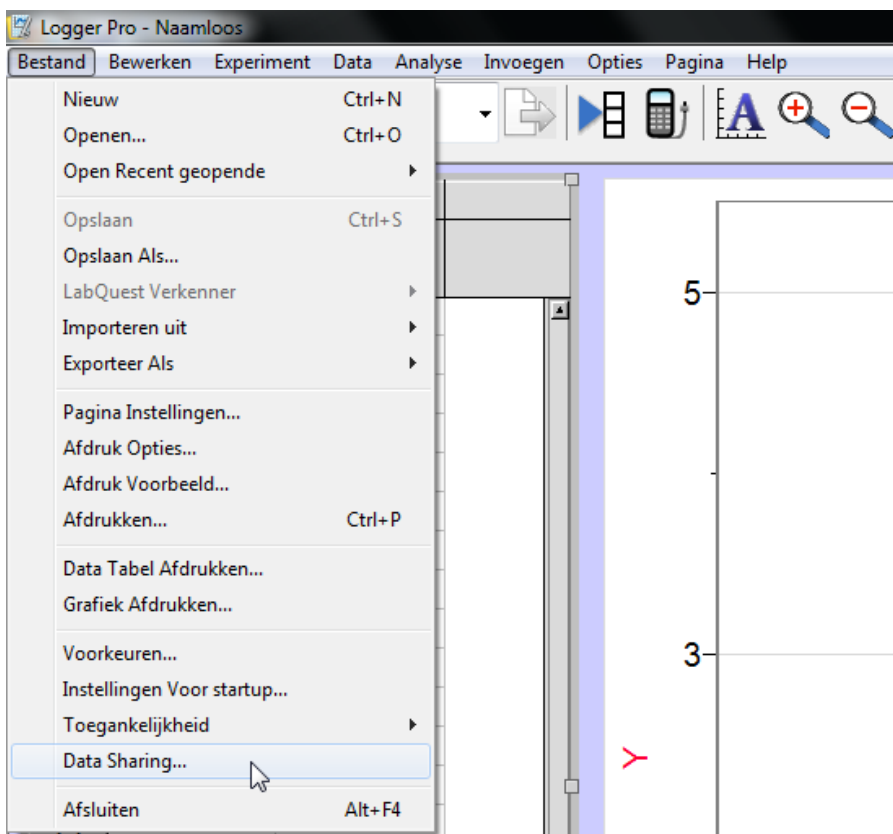

Kies Bestand – Data Sharing...

Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

Data Sharing

☒ **Enable Data Sharing** The Data Sharing feature enables a web service. While the service is tightly limited in its functionality, enabling it could introduce a security risk.

Status: Data Sharing is running

IP Adres: 192.168.16.205

Poort:

URLs: <http://192.168.16.205:8080>
<http://AnneTopma-HP.local:8080>

Data Sharing Name: AnneTopma-HP

☒ Afstandbediening van data collectie toestaan

☐ Dynamisch poortnummer gebruiken

More Info

Data Sharing allows you to share and display data from Logger Pro with Graphical Analysis for iPad and Vernier Data Share web app. To do this,


- 1) Enable Data Sharing
- 2) Connect another device to the same network.
- 3) Graphical Analysis: Choose this computer by name in the Add Session menu under the + sign.

or

Vernier Data Share: In a browser, enter either URL as shown, including all numeric values. Android systems require the fully numeric URL.


Vink activeren aan, kies eventueel in overleg met ICT, voor een dynamisch poortnummer.

Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

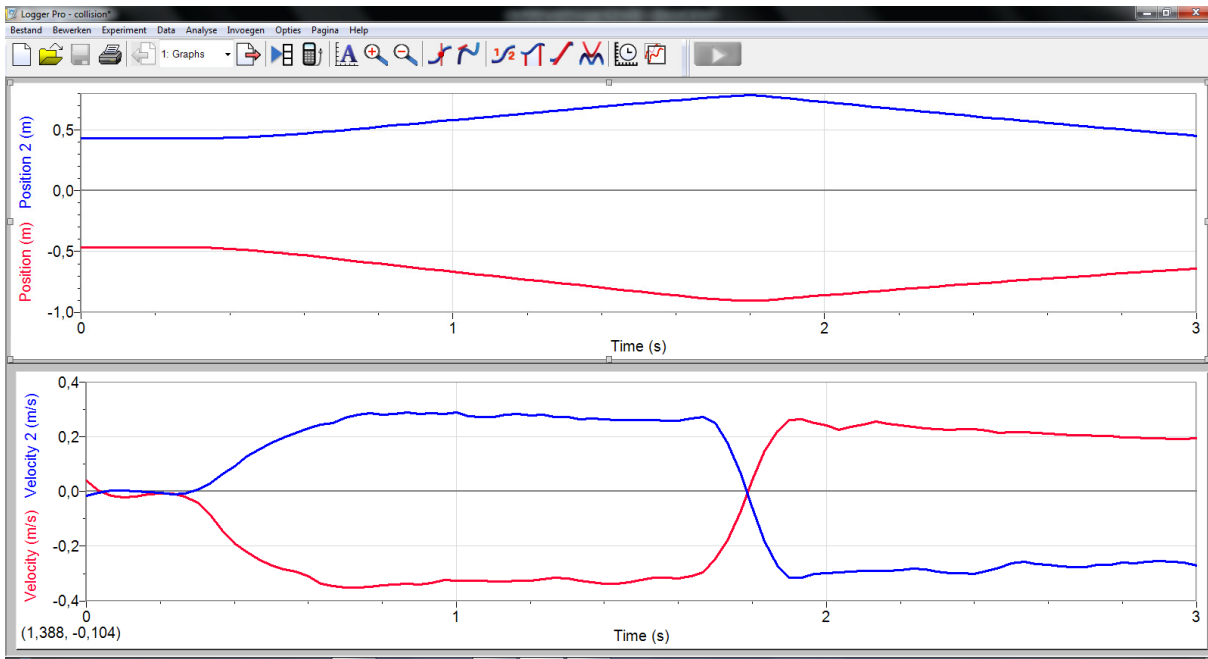


Meting in Logger Pro

Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

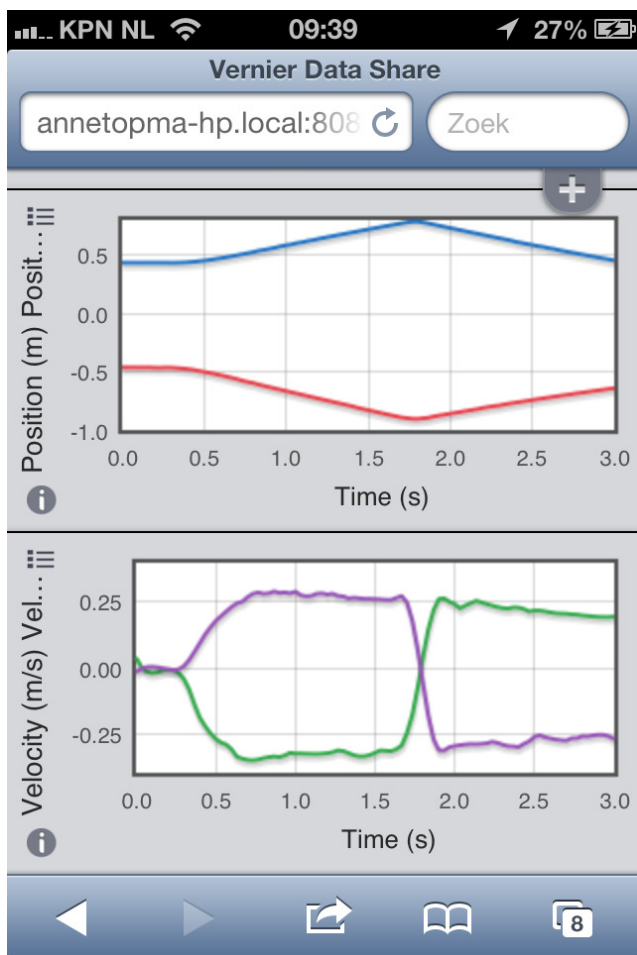

Zelfde meting live op iPhone (verbonden met zelfde netwerk: adres in browser: <http://annetopma-hp.local:8080> , zie bij instellingenscherf van Data Share)

Installatie update Logger Pro 3.8.6 inclusief Data Share

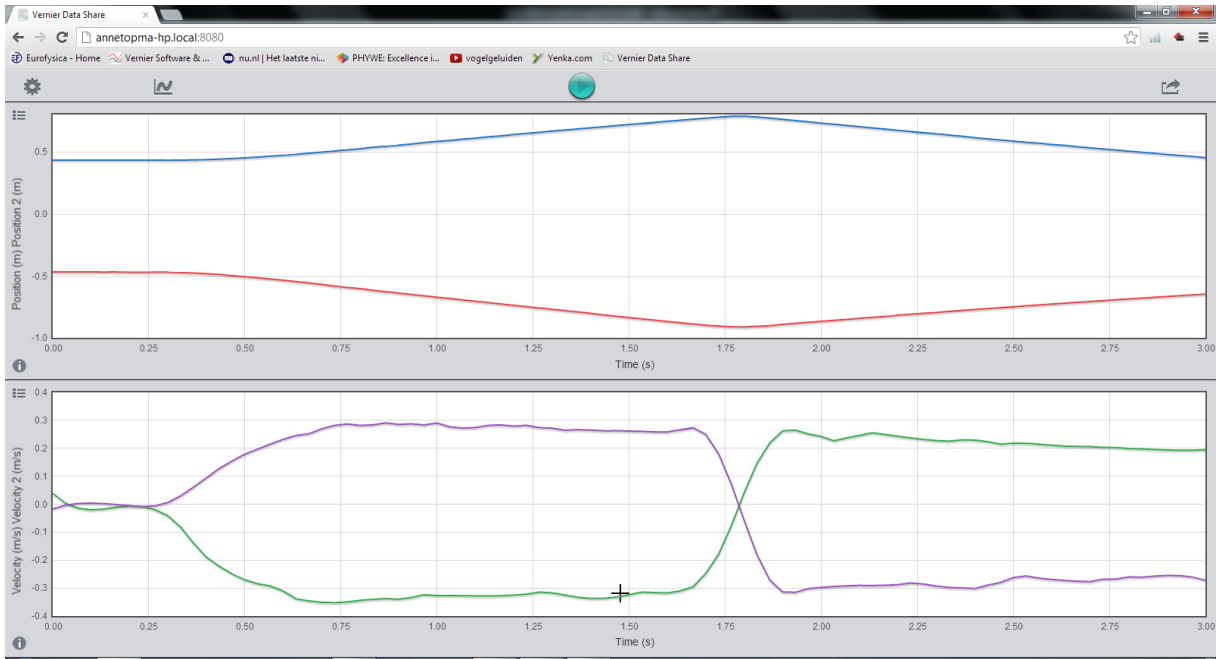

Zelfde meting live in Chrome Browser in hetzelfde network: adres: <http://annetopma-hp.local:8080>

Omdat Data Share op het allerlaatst nog aan de Software is toegevoegd zijn sommige teksten in de software niet vertaald. Deze worden vertaald in de volgende update.